



Стоматологическая
установка
U200



БЛОК ВРАЧА

В БАЗОВЫЙ БЛОК ВРАЧА ВХОДИТ:

- Система антисасывания для турбинных наконечников
- Система автоматической инициализации выбора инструмента и блокировки неиспользуемых инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Система пневматической фиксации блока в рабочем положении

Применение электрических клапанов для инструментов компании Automatic Switch Company (США) ставит U200 SE в один ряд с европейскими установками премиум-класса.

Все пантографические плечи установки сделаны из металла и покрыты эпоксидной порошковой краской, что гарантирует долговечность работы.



Нижняя подача инструментов



Верхняя подача инструментов

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пистолет вода/воздух
- 6-ти канальный модуль с фиброоптикой
- Два 4-х канальных модуля
- Турбинный модуль



БЛОК АССИСТЕНТА

Блок ассистента имеет свободный, плавный ход и удобный доступ к 4 инструментам:

- 2 канюли аспирации эжекторного типа
- два дополнительных инструмента

Управление инструментами и движением кресла пациента выведены на сенсорную панель управления, гарантирующую максимально точную работу.

СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДЕЗИНФЕКЦИИ)

Система антивсасывания и система дезинфекции воды предотвращают распространение перекрестных инфекций между пациентами.



ГИДРОБЛОК

Поворотный гидроблок с системой аспирации эжекторного типа совмещен с креслом пациента, что придает установке компактный вид. Все внутренние шланги изготовлены итальянским производителем Sirai, гарантирующим безупречное качество.

*Возможно оснащение системой аспирации для подключения вакуумной помпы.**

* Опция

СТУЛЬЯ ВРАЧА И АССИСТЕНТА

Стулья врача и ассистента входят в базовую комплектацию.



ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА

Универсальный металлический держатель монитора входит в базовую комплектацию.

ПОДЛОКОТНИКИ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА

Левый и правый подлокотники входят в базовую комплектацию.





СВЕТИЛЬНИК

Бестеновой светильник Siger LED светодиодного типа с сенсорной системой регулировки яркости и легкой фиксации по 2-м осям гарантирует оптимальное освещение рабочей зоны.

ПЕДАЛЬ

Многофункциональная педаль позволяет удобно и безопасно управлять скоростью наконечников, движением кресла и работой светильника.



ПОДГОЛОВНИК

Артикуляционный подголовник позволяет настраивать оптимальный угол наклона, удобный для пациента и врача, а также вести детский и взрослый прием.

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА

Кресло имеет высокий уровень комфорта для пациента, а тонкая спинка из алюминиевого профиля удобна для работы врача в любом положении. Кресло оснащено системой аварийной остановки движения, «памятью» на 5 положений, бесшумным электромотором датской компании Linak и регулируемым подголовником.



ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА

Керамическая плевательница имеет функцию автоматического смыва и подлежит многократному автоклавированию, что полностью соответствует европейским нормам гигиены.

ВАРИАНТЫ ОБИВОК

Бесшовная обивка выполнена из мягкой итальянской кожи разных цветов и наполнителя «memory foam» (материал «с памятью», принимающий форму тела пациента).



Стандартная обивка



Итальянская обивка*

* Опция

ОПЦИИ



СВЕТИЛЬНИК FARO EDI*

Галогенный светильник Faro EDI (Италия) особенно удобен в работе благодаря отражателю, защите от перегрева, вентилятору и съемным автоклавируемым ручкам. Яркий бестеневого свет с возможностью плавной регулировки яркости дает мощное направленное освещение.

СВЕТИЛЬНИК ГАЛОГЕННЫЙ*

Галогенный бестеневого светильник с точным позиционированием обеспечивает зону лечения достаточным уровнем света.



АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ПОДГОЛОВНИК*

Артикуляционный подголовник позволяет менять угол наклона в горизонтальной плоскости. Рассчитан на взрослый и детский прием.

* Опция

ОПЦИИ

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ*

В беспроводной многофункциональной педали скорость работы наконечников регулируется нажатием на широкую платформу. Большие функциональные клавиши отвечают за движение кресла и работу плевательницы.




СКАЛЕР*

Встраиваемый скалер выполнен из медицинского пластика. Скалер предназначен для очищения зубодесневых карманов и зубов от отложений камня и налета. Применения в пародонтологии и эндодонтии, отличается эргономичной формой и легким весом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР*

Электрический микромотор с регулировкой скорости и внутренней системой охлаждения.

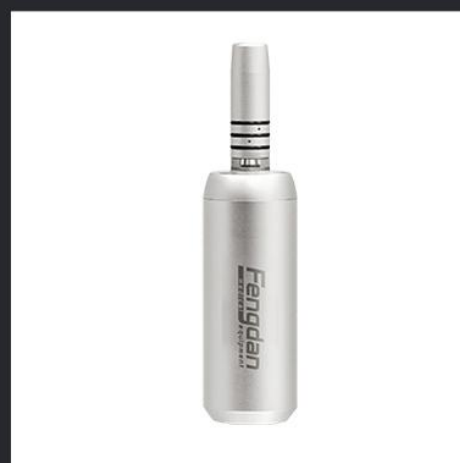

* Опция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Технические характеристики и оборудование

Блок врача

Негатоскоп	●
4-х канальный шланг стандарта Midwest (2 шт.)	●
Блок и шланг с фиброоптикой стандарта Midwest (1 шт.)	●
Пистолет вода/воздух	●
Модуль для подключения пневматического микромотора	●
Пневматический микромотор	○
Модуль для подключения 5-го инструмента	●
5-й инструмент	○
Встроенный пьезоэлектрический скалер	○
Электромотор Ben Air	○
Манометр рабочего давления	●
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с верхней подачей	●
Силиконовая автоклавируемая накладка под инструменты (на блоке с верхней подачей инструментов)	●
Пневматический кнопочный фиксатор блока врача в рабочем положении	●
Мембранная панель управления	●
Сенсорная панель управления	○

Блок ассистента

Пистолет вода/воздух	●
Встроенная система для подключения вакуумной помпы	○
Мембранная панель управления	●
Сенсорная панель управления	○

Кресло

Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений	●
Подготовка под систему аспирации вакуумного типа	○
Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием)	●
Комплектация моторами Linak (Дания)	●
Комплект подлокотников (левый и правый)	●
Высококачественная итальянская обивка	○

Гидроблок

Совмещенный с креслом пациента	●
Система аспирации эжекторного типа	●
Система аспирации вакуумного типа	○
Система автоматического наполнения водой стакана и омыва плевательницы	●
Бойлер для подогрева воды	●
Автономная подача воды на инструменты	●
Система дезинфекции инструментов и шлангов	○
Многофункциональная педаль управления	●
Керамическая поворотная съемная плевательница с возможностью автоклавирувания	●

Светильник

Бестеневой, галогенный, ≥ 25 000 люкс	○
Бестеневой, светодиодный, 9 000 - 33 000 люкс	●
Faço EDI (Италия), бестеневой, галогенный, 25 000 - 35 000 люкс	○

Прочее

Держатель монитора	○
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)	○
Стул врача и стул ассистента	●
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента	○
Коммуникационный бокс	●

● Входит в комплектацию / ○ Дополнительная опция